



# ENDYMED™ | PURE

más potente. más eficaz. más versátil

2.0

# ENDYMED™ PURE 2.0 | RF 3DEEP®


*Cuando belleza y tecnología se unen*

ENDYMED PURE 2.0 ofrece la única tecnología 3DEEP RF, aprobada por la FDA, que proporciona soluciones estéticas, innovadoras y eficaces en tratamientos no invasivos de tensado de la piel, lifting, remodelado corporal y resurfacing fraccional de la piel.


La **tecnología 3DEEP** desarrollada por ENDYMED es una radiofrecuencia con múltiples generadores de fase controlada completamente innovadora, segura y eficaz. 3DEEP utiliza una matriz de generadores de RF y un sofisticado algoritmo que gestiona las diferentes fases de energía emitida de manera simultánea entre diferentes sets de electrodos. Las fuerzas de repulsión entre campos electromagnéticos adyacentes dirigen verticalmente la energía hasta el tejido objetivo, reduciendo significativamente el flujo de energía en toda la superficie de la piel (evitando posibles efectos secundarios) y eliminando la necesidad de refrigeración.

## 3DEEP


Energía RF  
Focalizada  
y en  
profundidad

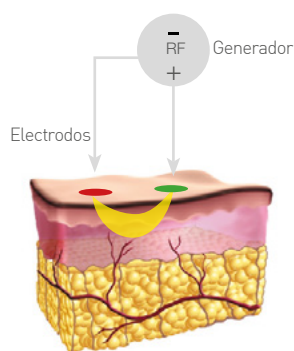

**A** RF bipolar y x-polar - relativamente superficial y menos efectiva

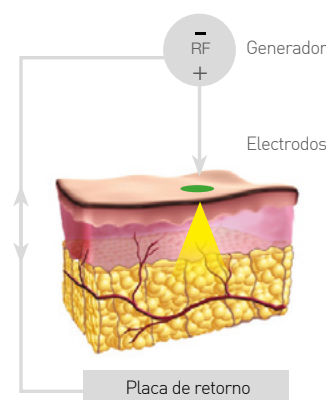

**B** Monopolar RF - la energía fluye de forma no controlada en el tejido, y requiere de refrigeración

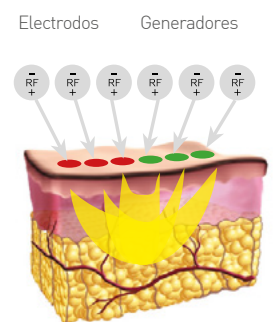


**C** 3DEEP RF - flujo de energía focalizada y mantenida en profundidad sin necesidad de refrigeración

## Resurfacing Fraccional de la Piel FSR 3DEEP

Consigue una superficie de la piel más suave y brillante (estrato córneo y epidermis) y reduce la hiperpigmentación (epidermis). Simultáneamente, el calentamiento volumétrico en profundidad a nivel de dermis alcanza las fibras de colágeno causando un inmediato efecto de tensado duradero a largo plazo. El Resurfacing Fraccional de 3DEEP trata efectivamente todas las capas de la piel para un resultado óptimo.

- **6 niveles** mejorados de tratamiento de alta energía
- **Duración de Pulso:** 0.01-0.06 seg.
- **Tip Desechable:** Matriz de 112 microspots 10x15mm  
Hasta 450 pulsos

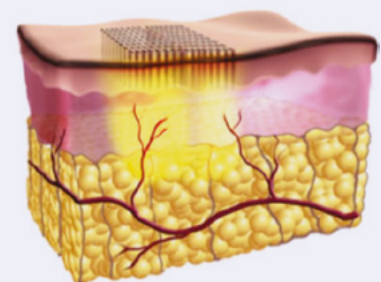



## ENDYMED PURE 2.0

Con una potencia superior, hasta 65W, PURE 2.0 ofrece tratamientos más potentes y eficaces.

PURE 2.0 está disponible con el aplicador de RF Fraccional FSR, para un calentamiento volumétrico dérmico profundo.

Tratamientos mejorados del contorno corporal con los nuevos aplicadores Shaper y Mini Shaper.

Interfaz de usuario y el diseño mejorados con una pantalla más amplia de 15 pulgadas.

ENDYMED PURE 2.0 está disponible con una amplia selección de aplicadores fácilmente intercambiables

RF Focalizada

**Shaper  
3DEEP**

Es la solución ideal para el tratamiento de las áreas más grandes del cuerpo, como **abdomen, glúteos y muslos.**



RF Focalizada

**Mini Shaper  
3DEEP**

Tratamiento de RF focalizada para la **mandíbula, mentón, brazos y rodillas.**



Tensado &  
Remodelado

**iFine  
3DEEP**

Especialmente diseñado para el tratamiento de las arrugas y la laxitud de la piel en el delicado tejido **alrededor de los ojos y de la boca.**



RF Fraccional

**FSR 3DEEP  
Resurfacing  
Fraccional**

Especialmente diseñado para el rejuvenecimiento cutáneo fraccional y tratamiento de la **rugosidad** de la piel, **hiperpigmentación, arrugas y cicatrices faciales y corporales.**



## Tratamientos 3DEEP disponibles con la plataforma ENDYMED PURE 2.0

- ✓ Tensado facial, lifting y reducción de arrugas
- ✓ Remodelación y tensado corporal
- ✓ Reducción de acné y de las cicatrices de acné
- ✓ Resurfacing fraccional
- ✓ Reducción de las cicatrices
- ✓ Mejora de la textura



## Veamos los resultados de 3DEEP

ENDYMED PURE 2.0 ofrece la única tecnología Radiofrecuencia 3DEEP, aprobada por la FDA. La radiofrecuencia focalizada más eficaz disponible en el mercado. A diferencia de las tecnologías de Radiofrecuencia Monopolar o Bipolar, que a menudo pueden ser superficiales, dolorosas o peligrosas para la epidermis, la Radiofrecuencia 3DEEP de Endymed proporciona energía controlada profundamente en la dermis, llegando hasta 52°C - 55°C, con un mínimo calentamiento epidérmico para una remodelación del colágeno óptima e indolora.




Fotografías cortesía de Dra. Isabelle Rousseaux, Dermatólogo, Loos, Francia



Fotografías cortesía de Dra. Fiona Wright, Texas, USA




Fotografías cortesía de Dr. Masaki Sato, Cirujano Plástico, Sendai, Japan

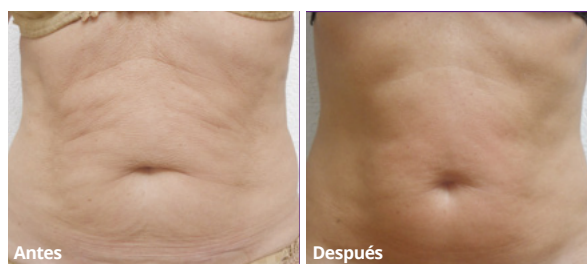

Fotografías cortesía de Dra. Isabelle Rousseaux, Dermatólogo, Loos, Francia



Foto cortesía de Dr. David J. Goldberg, EEUU

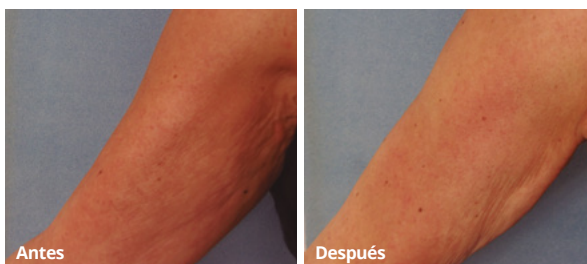

Fotografías cortesía de Dra. Isabelle Rousseaux, Dermatólogo, Loos, Francia

### Beneficios

- Alta efectividad y calidad de resultados en tratamientos de resurfacing de la piel, tensado en cara, cuello y remodelado corporal, todo en la misma plataforma.
- La gran variedad de aplicadores 3DEEP RF proporciona la mejor opción para cada tratamiento en piel laxa, flacidez, cicatrices de acné, reducción de arrugas, mejora de la celulitis, tensado y remodelación corporal.
- Tratamientos rápidos con poco o ningún downtime, seguridad óptima y mínima molestia sin efectos secundarios.
- Resultados visibles inmediatamente, apropiado para cualquier tipo y color de piel.
- Resultados duraderos a largo plazo
- Basado en la última tecnología de múltiples generadores de 3DEEP RF, con resultados avalados por numerosos artículos y publicaciones científicas.

### Experiencia de tratamiento incomparable

- Tratamientos 100% seguros, indoloros y eficaces, con poco o ningún downtime
- Para todo tipo de pieles y color
- Resultados superiores, inmediatos y a largo plazo
- Tratamientos rápidos - in-&-out

**ENDYMED**<sup>™</sup>  
3DEEP SKIN SCIENCE

[www.EndyMed.com](http://www.EndyMed.com)

### Acerca de EndyMed

Endymed Medical Ltd., establecida en 2007, es una compañía de equipos médicos dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas basados en fuentes de energía aplicadas a la estética para el mercado profesional. Los equipos de dirección, aplicación clínica, marketing e I+D de EndyMed gozan de una amplia experiencia en el mercado de la Medicina Estética. EndyMed es propietaria de la tecnología de radiofrecuencia 3DEEP, una solución perfecta para tratamientos de resurfacing fraccional, reducción de arrugas, tensado de la piel y remodelación corporal.



REFERENCE MEDICAL® DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ENDYMED EN ESPAÑA Y PORTUGAL  
[www.referencemedical.com](http://www.referencemedical.com)