



VOLNEWMER®

6.78MHz Monopolar RF

VOLNEWMER



EL BORDE
DEL TIP
OCULTO

SUPERFICIE
CURVA

ENERGÍA
RF RADIAL

ENFRIAMIENTO
CONTINUO
POR AGUA

CLASSYS


VOLNEWMER®
6.78MHz Monopolar RF

Volnewmer es el dispositivo de radiofrecuencia monopolar no invasivo y más seguro para el tensado y lifting de la piel. Combina la energía de radiofrecuencia y la tecnología más avanzada, ofreciéndole una experiencia integral en el tratamiento de la piel.

 **CLASSYS**

 **REFERENCE**
MEDICAL GROUP

¿QUÉ ES VOLNEWMER?

LA COMBINACIÓN DE UN DISEÑO INTUITIVO Y UNA TECNOLOGÍA FÁCIL DE USAR OFRECE UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LOS RESULTADOS DE TRATAMIENTOS

VOLNEWMER es la solución de tratamiento de RF más segura para el lifting, tensado y remodelado mediante rejuvenecimiento de la piel. Es el sistema estético más avanzado e innovador, con cuatro Tips únicos intercambiables con una superficie redondeada que maximiza la potencia de RF y la seguridad del tratamiento.

EL BORDE DEL
TIP OCULTO

Máximos resultados clínicos gracias a la tecnología de supresión de efectos secundarios y a la energía de Radiofrecuencia segura.

SUPERFICIE
CURVA

Energía de RF radial estable y más segura, gracias a la superficie curvada y el borde del Tip redondeado.

ENERGÍA RF
RADIAL

La energía de Radiofrecuencia radial proporciona un alto nivel de tratamiento.


ENFRIAMIENTO
CONTINUO
POR AGUA

La refrigeración continua por agua evita las quemaduras epidérmicas, permitiendo proporcionar un alto nivel de energía de RF.



MENOS DOLOR Y LA ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA MÁS SEGURA GRACIAS AL TIP DE BORDE OCULTO

- El sistema de control del dolor permite un mayor volumen de tratamiento con mejores resultados clínicos.
- Tips curvos ergonómicos para un contacto perfecto con la piel, optimizan el suministro de energía de RF.
- La entrega uniforme de radiofrecuencia en toda la superficie evita efectos adversos en la epidermis.

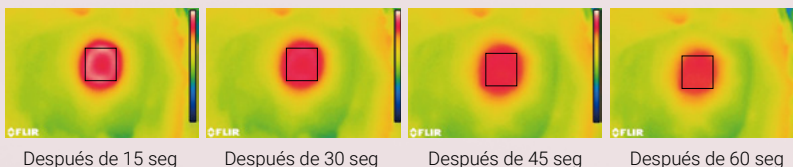


* La energía de Radiofrecuencia permanece constante en el mismo nivel hasta 60 segundos.

1

DISEÑO DE TIP CON BORDE OCULTO

El diseño de la superficie del Tip es curvo hacia dentro para evitar el fenómeno de agrupación de energía en los bordes, lo que garantiza una entrega segura de la energía, minimizando los efectos secundarios.

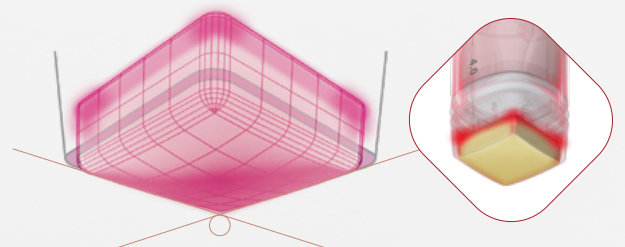


2

SUPERFICIE CURVA & ENERGÍA RF RADIAL

La energía de radiofrecuencia se entrega uniformemente en la dermis mediante Tips curvos ergonómicos. La superficie curvada del Tip permite un contacto perfecto con la piel. La energía térmica de RF de VOLNEWMER se genera de forma radial, lo que permite un tratamiento de alto nivel.

REESTRUCTURACIÓN Y REGENERACIÓN DEL COLÁGENO POR SUPERPOSICIÓN DE ENERGÍA


La energía de RF renueva el colágeno, estimula la barrera cutánea, mejora la elasticidad, tensa la piel y mejora la ECM (Extracellular Matrix).

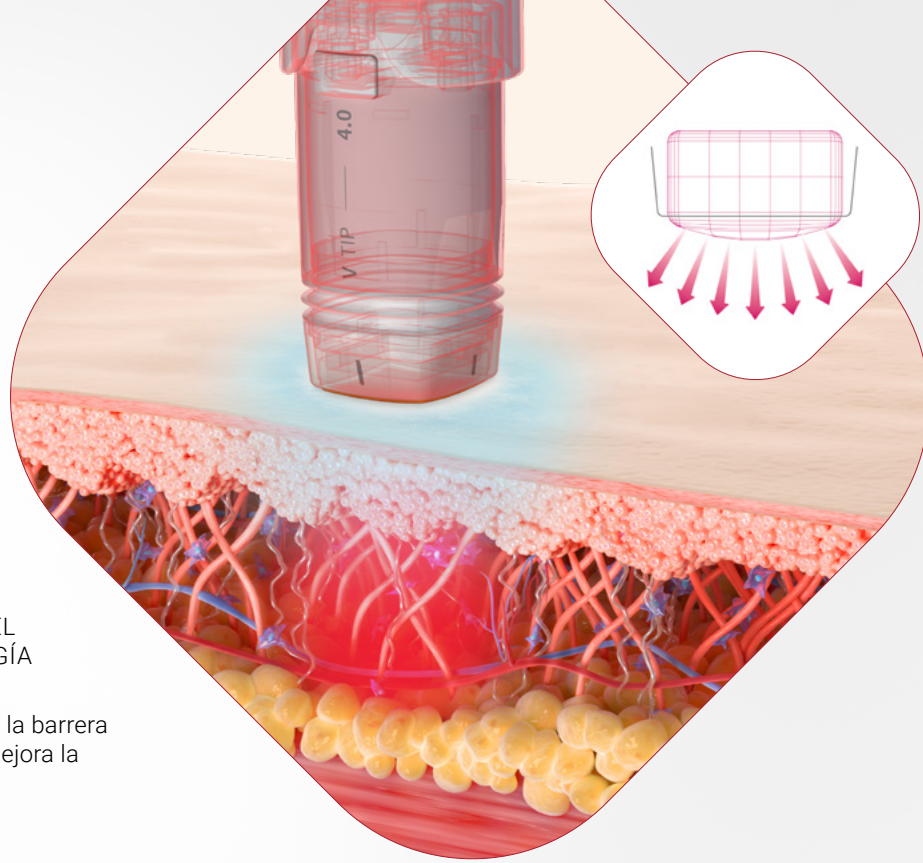

3

SISTEMA CONTINUO DE REFRIGERACIÓN POR AGUA

VOLNEWMER emplea una tecnología de emisión de alta frecuencia estable para aumentar la eficacia de la administración de energía y la reducción del dolor y los efectos secundarios. Esto lo consigue mediante la emisión de un único pulso de energía por REP (intervalo de repetición), en lugar de múltiples pulsaciones. El dispositivo también incluye un sistema de refrigeración optimizado diseñado para una emisión eficiente de energía RF, que actúa mediante refrigeración continua por agua en función del grado de la resistencia de la piel.

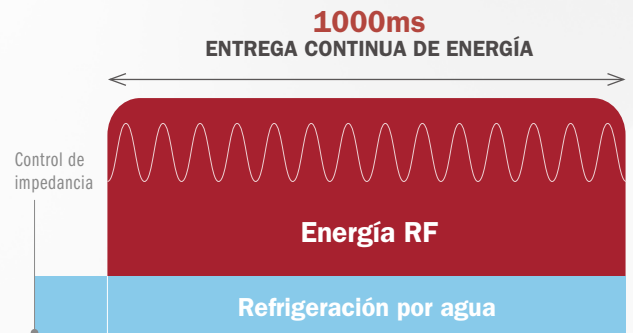


TRATAMIENTO RÁPIDO Y CÓMODO

El enfriamiento continuo por agua alivia el posible malestar de forma segura y protege la epidermis contra el daño mientras se genera la energía de radiofrecuencia.



ESTIMULA LA REGENERACIÓN DE COLÁGENO EN LA DERMIS PAPILAR

El enfriamiento por agua influye en la formación de energía térmica en la dermis papilar y produce efectos inmediatos después del tratamiento.


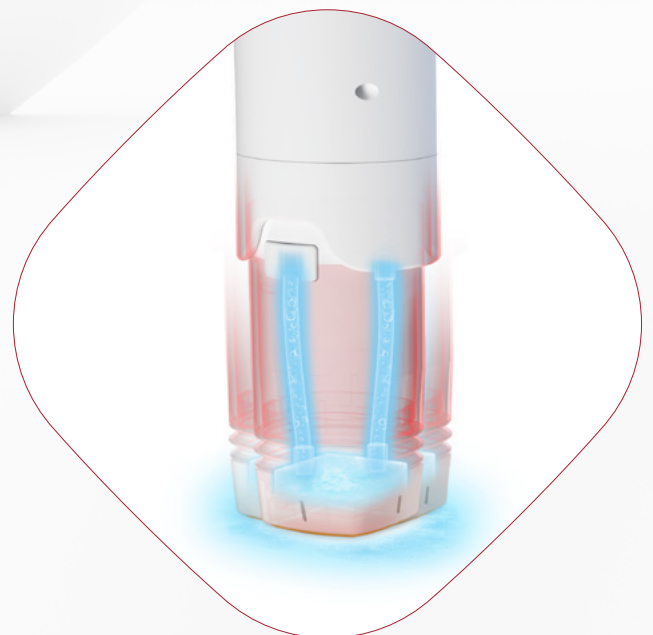


MÁS FÁCIL PARA EL MÉDICO MEJOR RESULTADO CLÍNICO

1

MODO DE REPETICIÓN ÓPTIMO

El modo de repetición permite un tratamiento más rápido. El borde oculto y la superficie curvada del Tip de **VOLNEWMER** generan el flujo radial de los electrodos y crean una formación de energía térmica superpuesta para optimizar los procedimientos repetitivos y superpuestos.

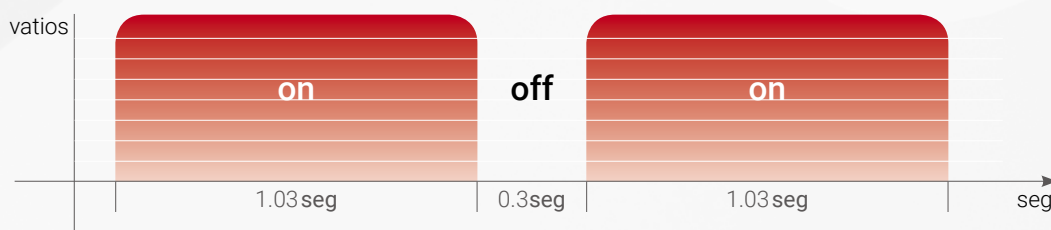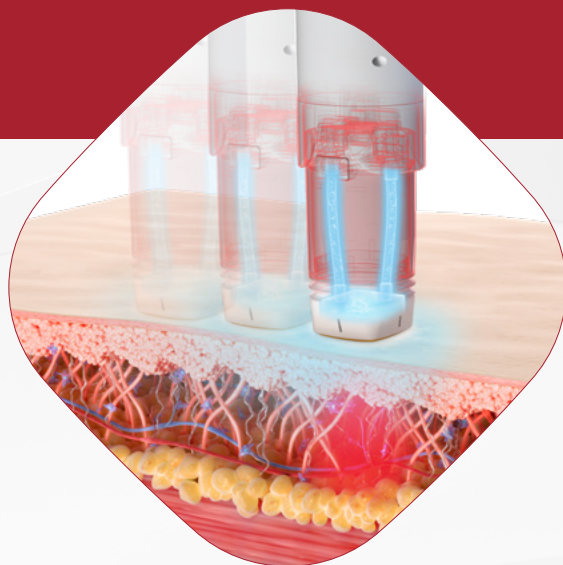

2

2 APLICADORES

VOLNEWMER permite realizar el tratamiento de forma rápida y sencilla.


Disponer de 2 aplicadores evita la incomodidad de tener que cambiar de Tips durante el tratamiento.



3

TIP FLEXIBLE E INCLINABLE

El Tip de **VOLNEWMER** está diseñado para inclinarse en todas las direcciones, lo que le permite moverse de acuerdo con la curvatura de la zona de tratamiento, mejorando así la estabilidad de contacto entre la superficie del Tip y la piel.

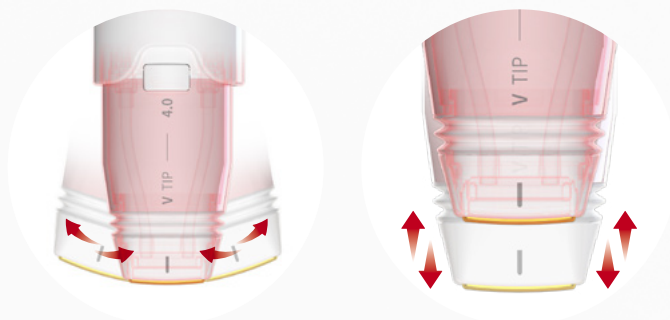

4

SISTEMA DE DETECCIÓN DE IMPEDANCIA EN TIEMPO REAL

VOLNEWMER detecta el cambio en el valor de la impedancia en toda la superficie del tip durante el disparo y contiene una tecnología que detiene la generación de RF incluso si una parte del Tip se separa de la piel, para evitar posibles efectos adversos.

5



SIN BLOQUEO DE TIEMPO

La duración del tratamiento debe determinarse según el criterio del médico. Al no haber límite de tiempo para los consumibles, los médicos pueden combinar hasta cuatro clases de Tips durante un mismo procedimiento.


6

4 TIPS DIFERENTES PARA TRATAR MÚLTIPLES ZONAS


Los diferentes Tips de VOLNEWMER están diseñados para permitir que los tratamientos faciales y corporales se personalicen de forma individual según las necesidades de cada paciente.

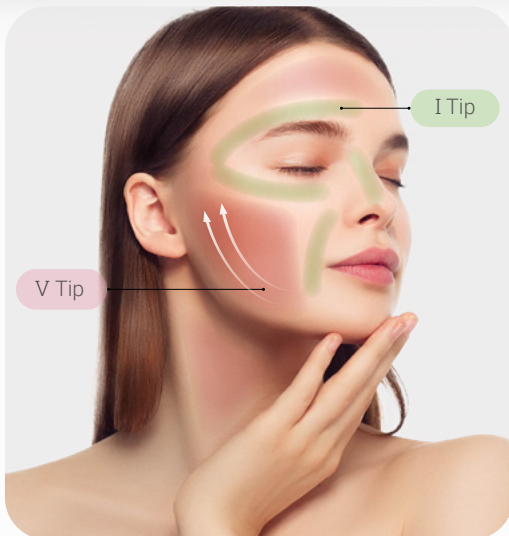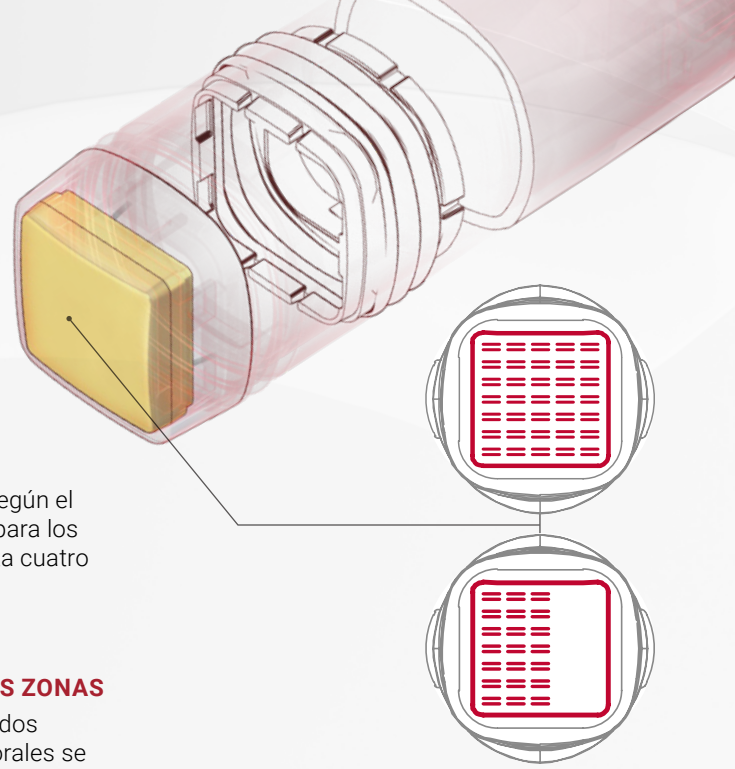

Existen varios programas de tratamiento, como Facial (ojos y frente), Corporal y Escote

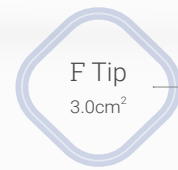


BRAZOS

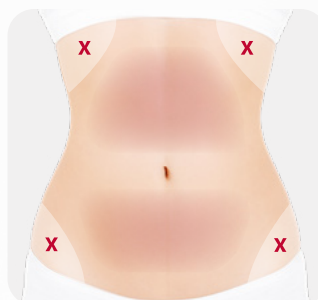

ABDOMEN



RODILLAS Y MUSLOS

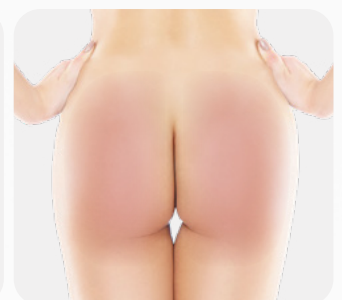

GLÚTEOS

RESULTADOS CLÍNICOS

TRATAMIENTO FACIAL



ANTES DE TRATAMIENTO



8 SEMANAS DESPUÉS



12 SEMANAS DESPUÉS



EFFECTO VOLUMEN



ANTES DE TRATAMIENTO



8 SEMANAS DESPUÉS

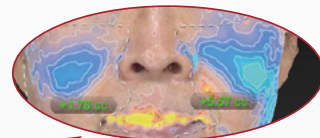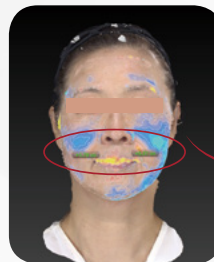

* Visualización del análisis cuantitativo de los cambios de volumen


EFFECTO LIFTING



8 SEMANAS DESPUÉS



12 SEMANAS DESPUÉS

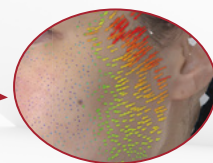

* El cambio de vector visualiza el grado de lifting de la piel

LIFTING & REDUCCIÓN DE ARRUGAS




ANTES DE TRATAMIENTO



12 SEMANAS DESPUÉS



ANTES DE TRATAMIENTO

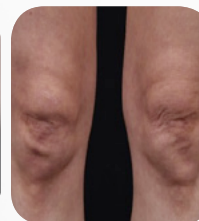

12 SEMANAS DESPUÉS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de sistema	Radiofrecuencia Monopolar
Aplicadores	2
Radio Frecuencia	6.78MHz
Tensión nominal, frecuencia	220~240VAC, 50/60Hz
Consumo de energía	1600VA
Alcance del tratamiento	Max 16cm ²
Tips	I Tip 0.25cm ² , F Tip 3.0cm ² , V Tip 4.0cm ² , S Tip 16.0cm ²

Dimensiones ancho x fondo x alto	466 x 567 x 1527mm
Peso (Incluye agua de refrigeración)	56Kg
Valor de resistencia	75~400Ω
Potencia	400W
Tamaño de la pantalla	25,7 cm LCD pantalla táctil

FDA K240248

REFERENCE
MEDICAL GROUP

DISTRIBUIDOR OFICIAL CLASSYS ESPAÑA Y PORTUGAL
www.referencemedical.com
info@referencemedical.com

CLASSYS

T. +82-2-517-2114 | classsys.com | info@classsys.com
Las imágenes y los textos son propiedad intelectual de Classys. La copia de este material puede estar sujeta a cargos de derecho civil y penal de la justicia legal.
Derechos de autor de Classys © Todos los derechos reservados